

LOJER®

*Ihmiskeho on luonnon huipputeknologiaa,
jossa monimutkaisimmat toiminnot yhdistyvät
ainutkertaisiin yksilöominaisuuksiin.
Siksi kehon korjaaminen ja huoltaminen on
asiantuntijoiden työtä, joka vaatii paljon myös työvälineiltä.*

manuthera® 242

MOBILISAATIO- JA MANIPULAATIOHOITOJEN UUSI ULOTTUVUUS



Tehostunut ja tarkentunut diagnostiikka

Huippuluokan potilasmukavuus ja -turvallisuus

Kasvanut työteho ja korkealuokkainen ergonomia

Uudenlaiset hoitomenetelmät mahdollistavat ominaisuudet

Asiantuntijoiden kehittämä, maailman monipuolisin hoitopöytä

Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämä ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Manuthera® 242 mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille.

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus- ja hoitotyöhön erilaisille terapeuteille urheiluhierojasta naprapaateihin, osteopaateihin, OMT fysioterapeuteihin, fysioterapeuteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjausjärjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava rakenne ja toiminnallisuudet.

Potilaan liikuttaminen terapeuttisesti ja anatomisesti tärkeisiin asentoihin tapahtuu sulavasti ja äänettömästi. Liikehoidossa saavutetaan täydellinen kolmedimensionaalinen liike hyödyntäen pöydän traktio, fleksio, lateraalifleksio ja rotaatio-ominaisuuksia sekä painovoimaa. Pöydän muotoilu, kaksimoottorijärjestelmä ja täyslaakeroitu runko vähentävät terapeutin työn kuormittavuutta ja parantavat työergonomiaa johtaen entistäkin parempiin hoitotuloksiin.

Huippuominaisuudet potilaan parhaaksi

Kaksoistaittava pääosa

edistyksellisellä 3D-toiminnolla mahdollistaa pään pystysuuntaisten ja sivuttaisten liikkeiden avulla kaularangan ja niskan turvallisen mobilisoinnin.

Käsituissa portaaton korkeussäätö ja sivusuuntainen liikerata. Sivulle kiinnitettävissä käsituet toimivat tarvittaessa levikkeinä.

Helppokäyttöiset, ergonomiset ja tukevat **nupit** lukitsevat liikeradan haluttuun kohtaan.

Turvareuna pysäyttää kosketuksesta kaikki pöydän liikkeet.

Säädettävät **jalat** tukitassuilla.

Erittäin laaja **High/ Low korkeussäätö**.

Thoraxin alueen kaksiosainen elementti mahdollistaa rintakehän vertikaalisen taiton ja 3D-ulottuvuuden pyörittävällä liikkeellä. Ainutlaatuinen työkalu rintarangan mobilisaatioon ja manipulaatioon!



Korkeatasoinen hoitokokemus potilaalle

Manuthera 242 tarjoaa potilaalle laadukkaan hoitokokemuksen. Kaikissa hoitotoimissa tukeva runko, anatominen muotoilu ja pehmustus sekä helposti puhtaana pidettävät pintamateriaalit tekevät potilaan olosta miellyttävän.

Pöydän makuutaso liikkuu kuin potilaan selkäranka, eikä terapeutin tarvitse nostaa potilasta. Pöydän pehmeät ja kevyet liikkeet luontaisilla liikeradoilla tekevät hoidosta kivutonta ja rentouttavaa. Miellyttävä hoitokokemus mahdollistaa suuremmat toistomäärät ja näin tehokkaamman hoidon.

Sähköisen kallistustoiminnon avulla huonokuntoinenkin potilas pääsee pöydälle helposti. Monimenetelmähoitoihin joustavasti mukautuva tekniikka varmistaa, ettei potilaan tarvitse nousta pöydältä kesken hoidon.

Alavartalo-osassa extensio/flexion lisäksi sivuttainen liike ja 3D-kiertoliike.
UUTTA Alavartalon rotaatio-ominaisuus.

Moniasentoinen jalkaos: yläasento, hoidonaikainen jalkatuki ja astuttava jalkalauta.

Helppohoitoinen ja kestävä, bioyhteensopiva **soft moulded -makuutaso**.

Droppitoiminto. Uusi tekniikka, liukudroppi: traktiodropin avulla lannerangan manipulaatio helpottuu ja monipuolistuu merkittävästi.

Etu- ja takapäin **Total lock** -tuilla lisätukea kuormittaville hoitoliikkeille, ja pöytä on näin erittäin tukeva jokaisella alueella.

Manuthera 242:n synkronoidut nostomoottorit

Manuthera 242 -malli on maailman ensimmäinen hoitopöytä, joka on varustettu kahdella synkronisesti toimivalla nostomoottorilla. Kaksimoottorisuus mahdollistaa tasaisen ja kevyen liikkuvuuden sekä keventää terapeutin työtä. Automaattinen turva-toiminto havaitsee rakenteiden väliin puristumiset, pysäyttää moottorit ja nostaa pöytää esineen tai esimerkiksi raajan vapauttamiseksi.



Lukittavat siirtopyörät helppoon liikkeluun.

UUTTA Sähköisellä Tilt up-down -kallistuksella painovoimaa hyödyntävät hoidot ja potilaan helppo astuminen hoitopöydälle. Välilevyjien paineentasausta ei ole koskaan ollut näin tehokasta ja potilaalle miellyttävää.

Manuthera® 242 – edistyksellisen ammattilaisen työväline

Manuthera 242 on suunniteltu tukemaan terapeutin työtä monin eri tavoin:

- Huippuluokan suomalainen, ajaton muotoilu tukee ergonomiaa
- Edistykselliset hoitomahdollisuudet multitraktio- ja 3D-ominaisuuksien kautta
- Optimoidut motorisoidut toiminnot vähentävät voimankäytön tarvetta
- Lukuisia liikeratavaihtoehtoja samoille segmenteille
- Pöydän toiminnot tehostavat syvälle kehoon ulottuvia hoitotoimenpiteitä
- Pöydän niveltien kuulalaakerointi tekee liikkeistä pehmeitä ja kestää suuria toistomääriä
- Helppohoitoiset ja vahvat pintamateriaalit
- Pöydän helppo liikuteltavuus
- Potilaiden ylistämä, miellyttävä hoitokokemus
- Korkea jälleenmyyntiarvo
- Valmistajan takuu 3/10 vuotta


Katso tuotevideo <https://urly.fi/Nd0>



	Manuthera 242
Thoraxin alueen elementit	2
Korkeussäätö (High / Low)	49–105 cm
Paino	170 kg
Tilt Down -toiminnallisuus (pääosa alaspäin)	Sähköinen
Tilt Up -toiminnallisuus (pääosa ylöspäin)	Sähköinen
Alavartalon rotaatio	x
Total lock -toiminnallisuus ylävartaloon	x
Total lock -toiminnallisuus alavartaloon	x
Siirtopyörät	2
Maksimikuorma	150 kg
Nostomoottorit (vain työntö*)	2
Drop-toiminnallisuudet	Tavallinen drop ja liuku-drop
Automaattinen puristuksen esto -turvatoiminto	x
Turvakaari (häätäpysäytys)	x
Säädettävät jalat ja tassut	x
Toimintojen turvalukitus	Automaattinen (2 h) tai painamalla High / Low poljinta 3 kertaa alaspäin
Toimintojen aktivointi	High / Low polkimen tuplaklikkaus ylöspäin
Makuutaso	Soft moulded –makuutaso
U-muotoiltu kasvo-osa	x
Kasvoaukon tulppa	x
Valmistusmaa	Suomi

* Nosto moottorityönä, lasku painovoimaisesti

Manuthera 242

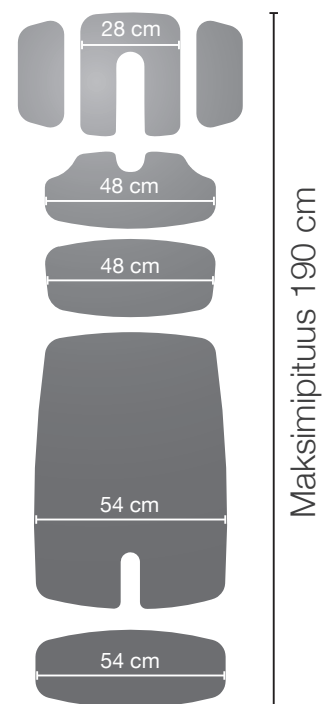

Tutustu tuotteen ominaisuuksiin ja lisäarvopalveluihin sekä monipuolisiin rahoitusmahdollisuuksiin, kuten leasing-rahoitukseen.

Kysy myös Manuthera-koulutuksistamme.

LOJER® For easy care

Lojer Oy | Putajantie 42 / PL 54 | 38201 SASTAMALA
Puh. 010 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com



Patent
US 9,642,761 B2

FENNIAPRIZE 17

HONOURABLE MENTION

Manuthera 242 mobilisaatio- ja manipulaatiohoitopöydän valmistaja on suomalainen Lojer Oy, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden kalusteita ja välineitä Suomessa ja kansainvälisesti.

Kaikki oikeudet tuotemuutoksiin pidätetään.